

SOFTWARE

NEUROFEEDBACK SOFTWARE



MINDFIELD NEUROFEEDBACK SOFTWARE UPDATE AUF DIE NEUESTE VERSION



Entdecken Sie das neueste Update unserer Neurofeedback Software! Verbessern Sie Konzentration und reduzieren Sie Stress durch flexibles, modulares Training. Ideal für Profis und ambitionierte Heimanwender. Schneller Download und 8 Wochen kostenfreier Support inklusive!

[Weiterlesen](#)

SKU: NFB-UPD

Price: €350,00

ERSATZ-DONGLE (USB) MIT BIOERA LIZENZ FÜR MINDFIELD MASTER SOFTWARE




Mit jedem Master Gerät erhalten Sie bereits einen USB Dongle, der Ihre Lizenz für die Master Software enthält.

[Weiterlesen](#)

SKU: USB-DON

Price: €249,00

EXCEL™ AUSWERTUNGSVORLAGE FÜR NEUROFEEDBACK SITZUNGEN

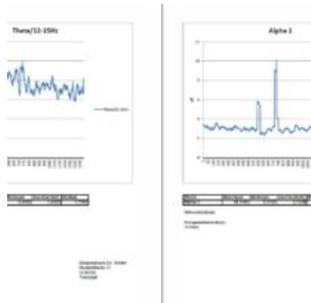

Optimieren Sie Ihre Neurofeedback-Sitzungen mit unserer Excel™ Auswertungsvorlage. Vereinfachen Sie die Analyse, erstellen Sie professionelle PDF-Berichte und verfolgen Sie Trainingserfolge mühelos. Perfekt für Trainer und Anwender im Biofeedback-Bereich!

[Weiterlesen](#)

SKU: EXC-TOL

Price: €199,00

NEUROFEEDBACK MODULE

NEUROFEEDBACK SOFTWARE MODUL: MINI QEEG



Steigern Sie Ihr Neurofeedback-Training mit dem Mini QEEG Modul! Analysieren Sie EEG-Aktivität präzise in 6 Kanälen für zielgerichtete Verbesserungen in Aufmerksamkeit und emotionaler Regulation. Optimieren Sie Ihre Ergebnisse – starten Sie jetzt!

[Weiterlesen](#)


SKU: SWM-QEEG

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz für unsere MindMaster Software.



NEUROFEEDBACK SOFTWARE MODUL: 6-KANAL STANDARDSITUATION

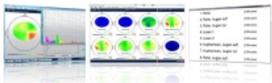


Optimieren Sie Ihr Neurofeedback-Training mit der 6-Kanal Standardsituation! Erleben Sie präzise Analysen von Frontalcortex, sensomotorischem und Parietalcortex. Steigern Sie Konzentration und emotionale Regulation professionell. Starten Sie jetzt!

[Weiterlesen](#)

SKU: SWM-NFB-6CH

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz für unsere MindMaster Software.

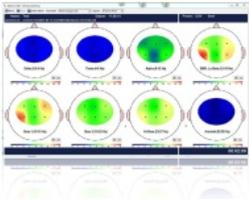

NEUROFEEDBACK SOFTWARE MODUL: SCP TRAINING



Erleben Sie mit dem Neurofeedback Software Modul SCP Training eine präzise Steuerung langsamer kortikaler Potentiale. Optimieren Sie Ihr Training, steigern Sie den Fokus und reduzieren Sie Stress. Inklusive spezieller Elektroden und Klebepaste für den sofortigen Start!

[Weiterlesen](#)

SKU: SWM-SCP

Price: €399,00

Lieferumfang: spezielle Elektroden, Ten20 Elektrodenklebepaste und Elektrodenhalterungen

BIOFEEDBACK SOFTWARE



SENSELEARN BIOFEEDBACK- TRAININGSOFTWARE FÜR SCHULEN UND LERNCOACHING

Entfesseln Sie Ihr Potenzial mit der SenseLearn Biofeedback-Trainingssoftware! Fördern Sie Selbstregulation von Konzentration und Entspannung bei Schülern. Ideal für Schulen und Coaches. Erleben Sie sofortige visuelle Rückmeldung für nachhaltige Lernerfolge!

[Weiterlesen](#)

SKU: SNS-LRN

Price: €799,00

Lieferumfang: Software "SenseLearn" für Windows 7, 8, 10, 11 mit Zugangscode für 2 Computer eSense Skin Response (Hautleitwert Sensor) mit zusätzlicher eSense App für ein Heimtraining Drei Elektrodentypen zur Messung des Hautleiterwertes je nach persönlicher Vorliebe (Klett-, Gel-, Fingerclip Elektroden) USB Adapter und Y-Kabel zum Anschluss des Hautleitwertensors an Ihren PC **60 Minuten persönliche Einführung (Online per Skype, etc.) durch Anne Weselek, den kreativen Kopf hinter SenseLearn (Termine können online oder per E-Mail vereinbart werden unter www.senselearn.de)**

MINDFIELD ESENSE SDK ZUR ENTWICKLUNG EIGENER MOBILER APPS (IOS/ANDROID)

Entwickeln Sie individuelle Apps mit unserem eSense SDK für iOS und Android! Nutzen Sie umfangreiche Tools zur Analyse von Biofeedback-Daten, um Stress und Stimmung zu steuern. Perfekt für Trainer und kreative Köpfe. Starten Sie jetzt!

[Weiterlesen](#)

SKU: SDK-ESE-MOB

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz, die per E-Mail verschickt wird.



MINDFIELD BIOFEEDBACK SOFTWARE UPDATE AUF DIE NEUESTE VERSION

Aktualisieren Sie Ihre Biofeedback Performance Software für optimalen Stressabbau und gesteigerte Konzentration. Nutzen Sie unser einfaches Download-Update für professionelle Anwendung und profitieren Sie von 8 Wochen kostenlosem Support. Starten Sie jetzt!

[Weiterlesen](#)

SKU: BFB-UPD

Price: €350,00

MINDFIELD®
MASTER SOFTWARE
BIOFEEDBACK PERFORMANCE

MINDFIELD®
MASTER SOFTWARE
BIOFEEDBACK MODULE



ERSATZ-DONGLE (USB) MIT BIOERA LIZENZ FÜR MINDFIELD MASTER SOFTWARE

Mit jedem Master Gerät erhalten Sie bereits einen USB Dongle, der Ihre Lizenz für die Master Software enthält.

[Weiterlesen](#)

SKU: USB-DON

Price: €249,00

MINDFIELD ESENSE SDK ZUR ENTWICKLUNG EIGENER WINDOWS SOFTWARE

Entwickeln Sie Ihre individuelle Software für Biofeedback-Training mit dem eSense SDK für Windows. Inklusive USB-Soundkarte und Splitterkabel für die einfachen Anschlüsse der eSense Sensoren. Starten Sie jetzt Ihre innovative Softwarelösung!

[Weiterlesen](#)

SKU: SDK-ESE-WIN

Price: €249,00

Lieferumfang: USB-Soundkarte zum Anschluss der eSense Skin Response, Temperature, Respiration (eSense-Sensoren selbst NICHT enthalten, bitte separat bestellen) Splitterkabel für USB-Soundkarte Außerdem ist dies eine digitale Lizenz und der Inhalt des SDK wird per separater E-Mail verschickt.

BIOFEEDBACK MODULE

BIOFEEDBACK SOFTWARE MODUL: EMG TRAINING

Verbessern Sie Ihre Muskelkoordination und reduzieren Sie Verspannungen mit unserem Biofeedback Software Modul EMG Training. Profitieren Sie von Echtzeit-Feedback zur Muskelaktivität für gezielte Trainingserfolge. Ideal für Profis und ambitionierte Heimanwender!

[Weiterlesen](#)

SKU: SWM-EMG-TRN

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz für unsere MindMaster Software.

Use the SenseLearns SkinResponse SDK

Technical Prerequisites: The SDK is compiled with Microsoft .NET Framework 4.5.2

Take a look at the [MainWindows.xaml.cs](#), it contains a fully working example of the SDK!

1. Reference the Class Library „SenseLearns.SkinResponse.DLL“ in your project

2. Import Namespace SenseLearns.SkinResponse

```
using SenseLearns.SkinResponse;
```

3. Create new instance of class SkinResponseService

```
var sk = new SkinResponseService();
```

4. Create new instance of class SkinResponseSensor (covered by value formatting, even covering average algorithm). For Mac/Win value calculation, use the targetThreshold parameter to the constructor

```
var skSensor = new SkinResponseSensor(0.05);
```

5. Subscribe to SkinResponseService.Dashboardable event. The event is fired multiple times a second and contains the current read value. Add this value to the SkinResponseSensor for value formatting, calibration, and getting Mac/Win value

```
skSensor.Subscribe(sk, Dashboardable);
```

6. Start SkinResponseService

```
skSensor.Start();
```

7. When done, either stop or dispose SkinResponseService

```
skSensor.Dispose();
```



BIOFEEDBACK SOFTWARE MODUL: EMG TESTUNG



Optimieren Sie Ihre Muskelkoordination mit unserem Biofeedback Software Modul: EMG Testung. Erhalten Sie Echtzeit-Feedback zur Muskelaktivität, steigern Sie die Körperwahrnehmung und optimieren Sie Ihr Training oder Ihre Therapie. Starten Sie sofort!

[Weiterlesen](#)


SKU: SWM-EMG-TST

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz für unsere MindMaster Software.



BIOFEEDBACK SOFTWARE MODUL: HERZRATENVARIABILITÄT (HRV)

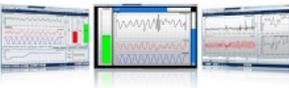

Verbessern Sie Ihre Herzratenvariabilität mit unserem Biofeedback Software Modul HRV. Steigern Sie Ihre Stresstoleranz und mentale Stabilität durch gezielte Atem- und Pulsanpassung. Ideal für Trainer und bewusste Heimanwender. Jetzt starten!

[Weiterlesen](#)

SKU: SWM-HRV

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz für unsere MindMaster Software.



BIOFEEDBACK SOFTWARE MODUL: STRESSTEST



Maximiere dein Trainingserfolg mit unserem Biofeedback Software Modul: Stresstest. Analysiere Stressreaktionen präzise, steigere die Entspannungsfähigkeit und verbessere deine Konzentration. Ideal für Trainer und ambitionierte Anwender. Starte jetzt!

[Weiterlesen](#)


SKU: SWM-STR

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz für unsere MindMaster Software.



KUBIOS HRV SCIENTIFIC & TEAM READINESS

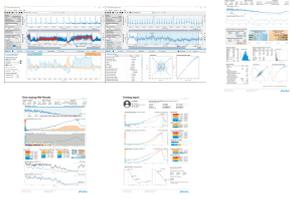

KUBIOS HRV SCIENTIFIC - JAHRESLIZENZ FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHE HRV-ANALYSE (KOMMERZIELL)


Transformieren Sie Ihr EKG-Gerät oder HR-Monitor mit Kubios HRV Scientific in ein leistungsstarkes Werkzeug zur detaillierten HRV-Analyse. Ideal für Trainer zur Stress- und Erholungsüberwachung. Digitale Lizenz sofort verfügbar, jetzt starten!

[Weiterlesen](#)

SKU: KUB-HRV-COM

Price: €815,15

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz, die per E-Mail verschickt wird.

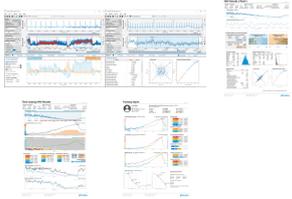

KUBIOS HRV SCIENTIFIC - JAHRESLIZENZ FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHE HRV-ANALYSE (AKADEMISCH)

Mit der Kubios HRV Scientific Jahreslizenz nutzen Sie Ihr EKG-Gerät oder HR-Monitor effektiv zur Analyse der Herzratenvariabilität. Perfekt für Trainer und Klienten, um Stress und Erholung zu messen. Jetzt starten und fundierte Insights gewinnen!

[Weiterlesen](#)

SKU: KUB-HRV-ACA

Price: €470,05

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz, die per E-Mail verschickt wird.

ESENSE SDK

MINDFIELD ESENSE SDK ZUR ENTWICKLUNG EIGENER MOBILER APPS (IOS/ANDROID)

Entwickeln Sie individuelle Apps mit unserem eSense SDK für iOS und Android! Nutzen Sie umfangreiche Tools zur Analyse von Biofeedback-Daten, um Stress und Stimmung zu steuern. Perfekt für Trainer und kreative Köpfe. Starten Sie jetzt!

[Weiterlesen](#)

SKU: SDK-ESE-MOB

Price: €399,00

Lieferumfang: Dies ist eine digitale Lizenz, die per E-Mail verschickt wird.



MINDFIELD ESENSE SDK ZUR ENTWICKLUNG EIGENER WINDOWS SOFTWARE

Entwickeln Sie Ihre individuelle Software für Biofeedback-Training mit dem eSense SDK für Windows. Inklusive USB-Soundkarte und Splitterkabel für die einfachen Anschlüsse der eSense Sensoren. Starten Sie jetzt Ihre innovative Softwarelösung!

[Weiterlesen](#)

SKU: SDK-ESE-WIN

Price: €249,00

Lieferumfang: USB-Soundkarte zum Anschluss der eSense Skin Response, Temperature, Respiration (eSense-Sensoren selbst NICHT enthalten, bitte separat bestellen) Splitterkabel für USB-Soundkarte Außerdem ist dies eine digitale Lizenz und der Inhalt des SDK wird per separater E-Mail verschickt.

Use the SensLearn SDKResponse SDK

Technical Prerequisites: The SDK is compiled with Microsoft .NET Framework 4.5.2. Take a look at the Main\Windows\SDK.cs. It contains a fully working example of the SDK!

1. Reference the Class Library _SensLearn SDKResponse DLL in your project
2. Import Namespace SensLearn.SDKResponse
`using SensLearn.SDKResponse;`
3. Create new instance of class SDKResponseService
`new SDKResponseService();`
4. Create new instance of SDKResponseClientClass (needed for value formatting, use default average and/or filter). For Max/Min value calculation, use the targetThreshold parameter in the constructor
`new SDKResponseClientClass(targetThreshold);`
5. Subscribe to SDKResponseService.DataAvailable event. The event is fired multiple times a second and contains the current read value. Add this value to the SDKResponseClientClass for value formatting, calculation, and getting Max/Min value
`SDKResponseService.DataAvailable += Service_DataAvailable;`
6. Start SDKResponseService
`SDKResponseService.Start();`
7. When done, either stop or dispose SDKResponseService
`SDKResponseService.Dispose();`

